

TOC 1500 HP Generador de carbono orgánico completo


Número de pieza: 42-1040 (230V) - UK | 42-1050 (230V) - EU | 42-1060 (110V) - US



Descripción

La gama de generadores especializados en TOC de Peak Scientific se ha diseñado específicamente para suministrar aire limpio, seco y sin dióxido de carbono ni metano para los analizadores de carbono orgánico total. Estos generadores, que suministran gas portador o de combustión desde un suministro de aire externo, están disponibles en dos modelos, según sus necesidades, el modelo estándar es adecuado para carbón orgánico no purgable (NPOC) mientras que el modelo HP es adecuado para el proceso TC-IC Total Analizadores de carbono orgánico.

- Tipos de gas Aire
- Compresor integrado: No

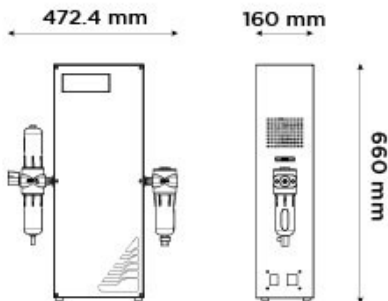

Características clave

- Produce aire limpio, seco, libre de hidrocarburos y dióxido de carbono
- Ideal para analizadores de TOC de proceso TC-IC
- Funciona 24 horas al día, 7 días a la semana si es necesario
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Funcionamiento completamente silencioso
- Se requiere una configuración mínima
- Puede ser compatible con Precision Air Compressor
- Garantía integral in situ de 12 meses

Especificaciones técnicas

TOC 1500 HP Generador de carbono orgánico completo

Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	1.5L/min
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Pureza máxima:	<1ppm CO2/ 0.1ppm THC
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSP Female
Presión mínima de entrada:	100psi/6,9bar
Presión máxima de entrada:	120psi/8,3bar
Consumo de energía:	115 W
Voltaje:	115 / 230 V ± 10%
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	2.6 / 5.2 A
Temperatura máxima de funcionamiento:	25°C / 77°F
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	620 x 430 x 410 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	24,4 x 16,9 x 16,1 inches
Peso del generador	57kg / 125,4lbs

[PEAK Protected]TM

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando **[Protegida]** por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças accese: www.peakscientific.com/ordering/
- Para planos de serviço, visite: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de nuestros ubicaciones de las oficinas, por favor visite:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003