

Infinity 1046

Nitrogen Generator

Número de pieza: 3302084




Descripción

El Infinity 1046, que genera hasta 20 L / min de nitrógeno y 70 L / min de aire seco, ha sido diseñado específicamente para admitir el PerkinElmer QSight Triple Quad, ya sea en configuración de fuente simple / doble. La serie Infinity son generadores de gas sin compresor que requieren una fuente limpia de aire interno para funcionar con eficacia. Con muy pocas partes móviles, estos generadores son efectivamente silenciosos en operación y solo necesitan un cuidado mínimo para garantizar un alto rendimiento continuo y una vida útil prolongada del producto.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Nitrógeno, Aire
- **Compresor integrado:** No

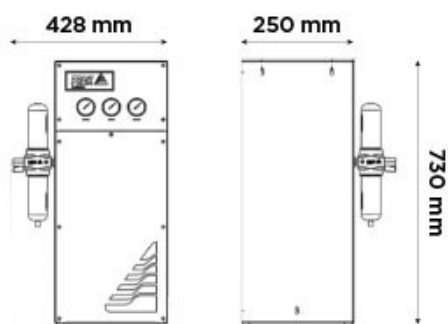

Características clave

- Suministra nitrógeno (gas de secado) hasta 20 L / min y aire (gas fuente) hasta 70 L / min
- Capaz de suministrar modelos QSight de fuente única y dual
- Funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un rendimiento óptimo si es necesario
- Fuente altamente económica de nitrógeno y aire con bajos costos de funcionamiento durante su vida útil
- Se requiere una configuración mínima
- Funcionamiento completamente silencioso
- 12 meses de garantía integral en el lugar

Especificaciones técnicas

	Infinity 1046 Generador de nitrógeno
Tipo de gas	Nitrógeno
Flujo de gas máximo:	20L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	70L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Instalación de salidas de gas:	2 x 1/4" BSPP
Presión mínima de entrada:	120psi/8,3bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	180
Calidad mínima del aire de entrada:	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
Tiempo de inicio:	60 mins
Consumo de energía:	0
Voltaje:	n/a
Frecuencia:	n/a
Corriente:	n/a
Salida de calor:	n/a
Temperatura máxima de funcionamiento:	30°C / 86°F
Partículas:	<0.01µm
Tamaño (HxAxD) en mm	730 x 422 x 250 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	28,7 x 16,6 x 9,8 inches
Peso del generador	23kg / 50,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

