

CG15L Zero Air

Suministro continuo de gas de calibración

Número de pieza: 43-1010 (230V) - UK |
43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) -
US




Descripción

Muchas aplicaciones de laboratorio, como las aplicaciones de emisión de aire, requieren gas de calibración. Para cumplir con estos requisitos, Peak Scientific ha producido el CG15L, que genera cero aire al eliminar el dióxido de carbono, el metano y la humedad del aire para aplicaciones que requieren un rendimiento más alto que los modelos de aire cero.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Aire
- **Compresor integrado:** No

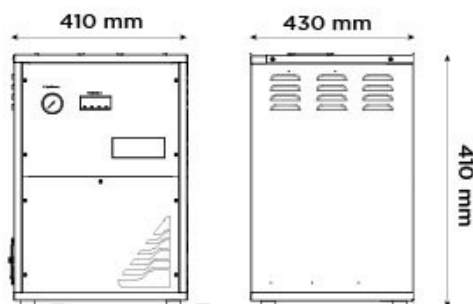

Características clave

- Produce aire limpio y seco para laboratorio, asegura un suministro óptimo para generadores e instrumentos de gas
- Suministro continuo de gas de calibración
- Cumple con los requisitos de la Especificación del Registro Federal 40CFR 86.114-79
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Funcionamiento completamente silencioso
- Puede ser compatible con Precision Air Compressor
- Se requiere una configuración mínima de 12 meses de garantía integral en el lugar

Especificaciones técnicas

CG15L Zero Air Generator

Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	15L/min
Pureza máxima:	<0.1ppm
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSP Female
Presión mínima de entrada:	100psi/6,9bar
Presión máxima de entrada:	125psi/8,6bar
Tiempo de inicio:	30 mins
Consumo de energía:	1100/540 W
Voltaje:	120 / 220 V ±10%
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	2.6 / 5.2 A
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	410 x 410 x 430 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Peso del generador	58kg / 127,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

