

Precision Zero Air 7L


Generador de soporte de llama

Número de pieza: 60-0008 (110V) | 60-0007 (230V)



Descripción

Los generadores de Precision Zero Air 7L están diseñados específicamente para suministrar aire limpio, seco y libre de hidrocarburos para ser utilizado como gas de soporte de la llama para GC en ambos límites de detección estándar y oligoelementos.

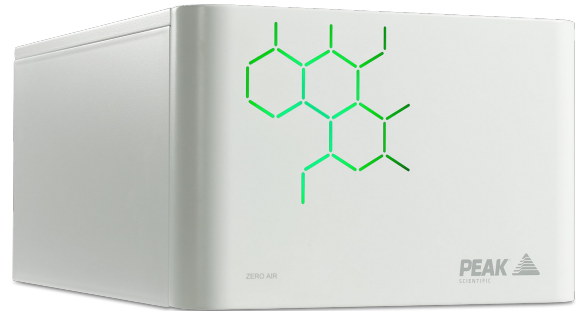


Generator Details

- **Tipos de gas:** Aire
- **Compresor integrado:** No

Características clave

- Se integra con los productos Precision existentes, con el mismo diseño modular y apilable
- Contenido de hidrocarburos (como metano)
- 0,05 ppm para una pureza líder en el mercado
- Hasta 7 l / min de aire cero
- Presión de salida de hasta 80 psi / 5,5 bar
- Requisitos mínimos de mantenimiento, sin costosos reemplazos de la cámara del catalizador
- Riesgo muy reducido de entrada de contaminantes al sistema y sin riesgo de quedarse sin gas
- Estética elegante y contemporánea y diseño funcional
- Función de iluminación indicadora de estado (calentamiento ámbar, verde listo)
- Compatible con compresor de aire de precisión
- Garantía integral in situ de 12 meses

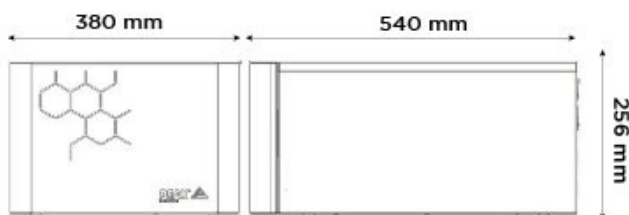

Especificaciones técnicas

Precision Zero Air 7L Generador de soporte de llama

Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	7L/min
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Contenido de hidrocarburos:	<0.05ppm
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4" BSPP
Presión mínima de entrada:	110psi/7,6bar
Presión máxima de entrada:	125psi/8,6bar
Min Air Inlet Flow:	7 L/min
Calidad mínima del aire de entrada:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Tiempo de inicio:	60 mins
Consumo de energía:	594 W
Voltaje:	110V / 230V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	3.3 - 5.4 A
Salida de calor:	2590
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Acreditaciones:	CE, FCC, CSA
Tamaño (HxAxD) en mm	256 x 380 x 540 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	10,1 x 15 x 21,3 inches
Peso del generador	25kg / 55lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

