

Precision Air Compressor


Número de pieza: 65-0555 (230V) | 65-1555 (110V)



Descripción

El compresor de aire de precisión está diseñado y fabricado específicamente para proporcionar una fuente de aire comprimido dedicada y totalmente integrada para los generadores de gas Precision Nitrogen y Precision Zero Air. Alojado dentro del mismo factor de forma compacto y apilable que los generadores, el módulo del compresor de aire Precision se puede agregar a cualquier pila Precision, generalmente como la unidad base, para brindarle una solución de gas GC autónoma completa, incluso donde no hay suministro doméstico. disponible. Gracias a un exclusivo sistema de montaje de compresor dúplex, el compresor de aire de precisión también se beneficia de un bajo nivel de ruido y vibración, lo que lo hace relativamente silencioso en su funcionamiento dentro de un laboratorio típico.

- **Tipos de gas Aire**
- **Compresor integrado:** Si

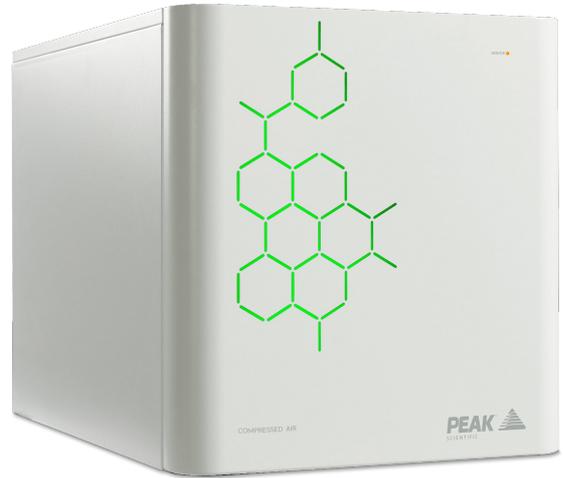

Características clave

- Suministro de aire comprimido para generadores Precision Nitrogen y Zero Air
- Una sola unidad puede suministrar tanto los generadores Precision Nitrogen como Zero Air en una pila
- Sistema de montaje de compresor dúplex para amortiguar el ruido y la vibración
- Servicio & indicadores de estado de reparación
- Garantía integral in situ de 12 meses

Especificaciones técnicas

Precision Air Compressor	
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	VariousL/min
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4" BSPP
Consumo de energía:	510 / 1150 W
Voltaje:	110 / 230 V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	10 A (110V) / 2.45 A (230V)
Salida de calor:	1740 - 3922 (BTU)
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Acreditaciones:	CSA, CE
Tamaño (HxAxD) en mm	406 x 380 x 540 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16 x 15 x 21,3 inches
Peso del generador	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando **[Protegida]** por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças accese: www.peakscientific.com/ordering/
- Para planos de serviço, visite: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de nuestros ubicaciones de las oficinas, por favor visite:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003