

Infinity 1031

Hi Flow Nitrogen Generator

Número de pieza: 13-1280




Descripción

La tecnología de membrana está en el corazón del generador Infinity 1031 Hi-Flow que proporciona una salida de nitrógeno de laboratorio y dos salidas de aire seco, el generador Infinity 1031 Hi-Flow es una solución duradera y sin complicaciones para los sistemas SCIEX LC-MS. La elección del modelo Infinity dependerá de la aplicación, con diferentes flujos de gas que definen los diferentes modelos. El generador de la serie Infinity de Peak Scientific ha sido diseñado específicamente para laboratorios que ya tienen una fuente externa de aire limpio y seco (podemos brindar asistencia en compresores externos o sistemas de prefiltración como parte de una solución de generación de gas Infinity). Estos sistemas no contienen partes móviles, son efectivamente silenciosos mientras están en funcionamiento y requieren un mantenimiento mínimo.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Nitrógeno, Aire
- **Compresor integrado:** No

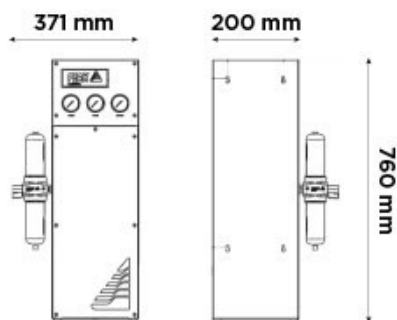

Características clave

- Capaz de suministrar múltiples sistemas SCIEX LC-MS
- Funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un rendimiento óptimo si es necesario
- El gas se suministra a pedido para que el generador funcione según su horario
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Se requiere una configuración mínima
- Funcionamiento completamente silencioso
- 12 meses de garantía integral en el lugar

Especificaciones técnicas

Infinity 1031 Hi Flow Generador de nitrógeno

Tipo de gas	Nitrógeno
Flujo de gas máximo:	10
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	22L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	10L/min
Presión máxima de salida:	60psi/4,1bar
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Presión mínima de entrada:	120psi/8,3bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	115
Calidad mínima del aire de entrada:	1.4.1
Tiempo de inicio:	30 mins
Voltaje:	N/A
Frecuencia:	N/A
Corriente:	N/A
Temperatura máxima de funcionamiento:	30°C / 86°F
Partículas:	<0.01 µm
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	760 x 371 x 200 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	29,9 x 14,6 x 7,9 inches
Peso del generador	18kg / 39,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

