

Precision Air Compressor


Compresor de aire para rango de precisión

Número de pieza: 65-0555 (230V) | 65-1555 (110V)



Descripción

El compresor de aire de precisión está diseñado y fabricado específicamente para proporcionar una fuente de aire comprimido dedicada y totalmente integrada para los generadores de gas Precision Nitrogen y Precision Zero Air. Alojado dentro del mismo factor de forma compacto y apilable que los generadores, el módulo del compresor de aire Precision se puede agregar a cualquier pila Precision, generalmente como la unidad base, para brindarle una solución de gas GC autónoma completa, incluso donde no hay suministro doméstico. disponible. Gracias a un exclusivo sistema de montaje de compresor dúplex, el compresor de aire de precisión también se beneficia de un bajo nivel de ruido y vibración, lo que lo hace relativamente silencioso en su funcionamiento dentro de un laboratorio típico.

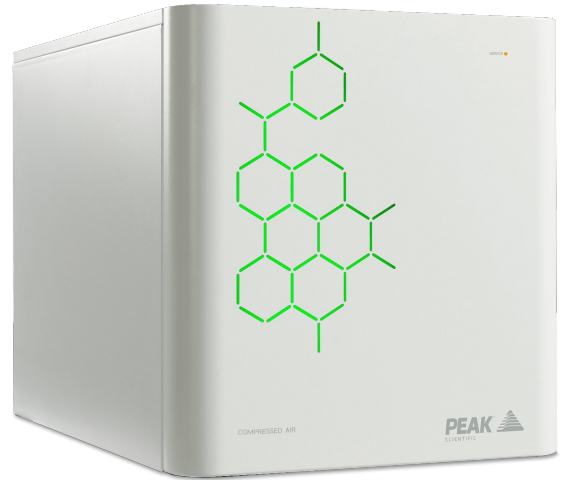


Generator Details

- **Tipos de gas:** Aire
- **Compresor integrado:** Si

Características clave

- Suministro de aire comprimido para generadores Precision Nitrogen y Zero Air
- Una sola unidad puede suministrar tanto los generadores Precision Nitrogen como Zero Air en una pila
- Sistema de montaje de compresor dúplex para amortiguar el ruido y la vibración
- Servicio & indicadores de estado de reparación
- Garantía integral in situ de 12 meses

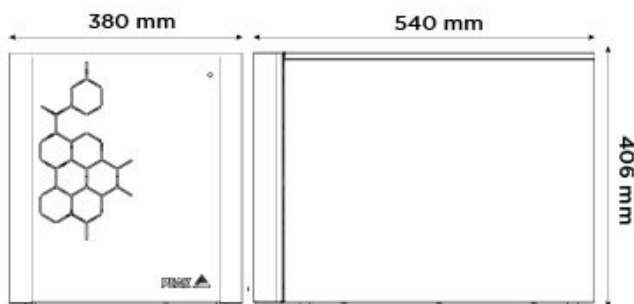

Especificaciones técnicas

	Precision Air Compressor
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	VariousL/min
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4" BSPP
Consumo de energía:	510 / 1150 W
Voltaje:	110 / 230 V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	10 A (110V) / 2.45 A (230V)
Salida de calor:	1740 - 3922 (BTU)
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Acreditaciones:	CSA, FCC, CE
Tamaño (HxAxD) en mm	406 x 380 x 540 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16 x 15 x 21,3 inches
Peso del generador	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

