

Infinity 1031

Nitrogen Generator

Número de pieza: 13-1270




Descripción

La tecnología de membrana es la base del Infinity 1031. Genera nitrógeno apto para laboratorio in situ a usuarios que ya disponen de un suministro de aire. Si fuera necesario, puede funcionar a pleno rendimiento durante las 24 horas del día y sus requisitos de mantenimiento son mínimos, por lo que el Infinity 1031 es una solución duradera y sin complicaciones para instrumentos de LC-MS de SCIEX.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Nitrógeno, Aire
- **Compresor integrado:** No

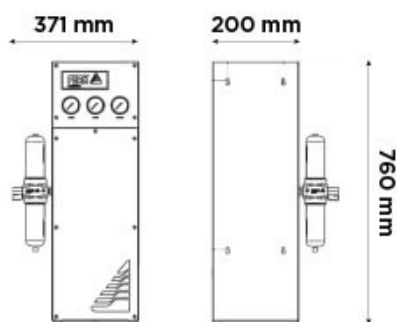

Características clave

- Capaz de suministrar la mayoría de los sistemas Sciex LC-MS / MS
- Funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana con un rendimiento óptimo
- El gas se suministra a pedido para que el generador funcione según su horario
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Se requiere una configuración mínima
- Funcionamiento completamente silencioso
- 12 meses de garantía integral en el lugar

Especificaciones técnicas

	Infinity 1031 Generador de nitrógeno
Tipo de gas	Nitrógeno
Flujo de gas máximo:	19
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	26L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	25L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Presión mínima de entrada:	120psi/8,3bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	115
Calidad mínima del aire de entrada:	1.4.1
Tiempo de inicio:	30 mins
Voltaje:	N/A
Frecuencia:	N/A
Corriente:	N/A
Temperatura máxima de funcionamiento:	30°C / 86°F
Partículas:	<0.01 µm
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	760 x 365 x 200 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	29,9 x 14,4 x 7,9 inches
Peso del generador	14kg / 30,8lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

